



La sedia Mobi-chair non è una barca. La posizione seduta è stabile in normali condizioni d'uso. Tuttavia, per motivi di sicurezza, un giubbotto di salvataggio è obbligatorio per i non nuotatori (questo può essere anche previsto dalla legge). Mobi-chair non è destinata ad aree con onde di corrente o forti.



VANTAGGI



- > Resistente a UV e acqua di mare
- > Mobile
- > Sicura e robusta
- > Sia per adulti che per bambini
- > Passaggio senza interruzioni dalla passerella alla spiaggia all'acqua
- > Galleggiante
- > Anticorrosione
- > Utile e ergonomica

Informazioni tecniche

Telaio pieghevole	Telaio in alluminio e forcella e hardware in acciaio inossidabile, resistente all'acqua salata			
Dimensioni della Mobi-chair	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	107 cm 42"	152 cm 60"	127 cm 50"	30kg 66 lbs
Dimensione della seduta	Width	Depth	Height	Max load capacity
	46 cm 18"	43 cm 17"	48 cm 19"	136 kg 300 lbs
Schienale regolabile	3 posizioni: rilassata, seduta, per nuotare			
Colore della seduta	Blu			
Materiale della seduta	Resistente ai raggi Uv - Resistente all'acqua - non allergenico			
Bracciolo staccabile	PVC - bracciolo flottante staccabile - bassa pressione			
Ruota anteriore	30cm x 16cm 12" x 6-1/2" pneumatico in gomma con rilascio rapido			
Ruota posteriore	40cm x 19cm 16" x 7-1/2" pneumatico in gomma con rilascio rapido			

Sedia a rotelle adattabile e di alta qualità



- > Facile mobilità attraverso sabbia e altre superfici ruvide



- > Imbracatura di sicurezza

- > I pneumatici in gomma assorbono lo shock e il disagio causati dal terreno accidentato



- > Massima stabilità con braccioli flottanti e pneumatici flottanti



- > Le maniglie integrate nei braccioli forniscono supporto

- > Il trasporto e lo stoccaggio sono convenienti

Installazione rapida e manutenzione ridotta

INSTALLAZIONE RAPIDA


Montaggio e smontaggio della sedia Mobile senza materiale e in massimo 10 minuti.

Completamente pieghevole, Mobi-chair® è facilmente trasportabile e si adatta perfettamente nel bagagliaio di un'auto.

FACILE MANUTENZIONE

Una volta alla settimana, lubrificare tutte le bielle e le viti di sicurezza.

Dopo ogni utilizzo, risciacquare Mobi-chair® con acqua dolce per evitare la corrosione e conservarlo in un luogo pulito e asciutto.

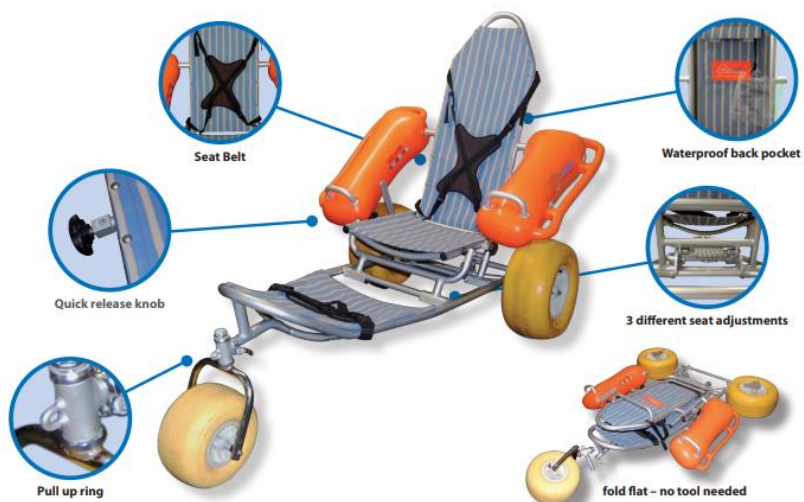

Applicazioni multiple

SABBIA



MARE



LAGHI



PISCINE



Quali sono i nostri prodotti complementari?

Mobi-mat®
Camminamenti



Mobi-roller™
Mats dispenser



Mobi-com™
Mat Pubblicità



Mobi-fence™
Frangivento

